



*Trice*

Nouvelles technologies pour la  
Communication  
Collaboration  
Archivage



- Limité en volume – pas de boucles
- Limité en qualité d'imagerie
- Conforme ?



## RGPD

Règlement Général sur la Protection  
des Données (RGPD)

En application depuis le 25 mai 2018





# RGPD



- Est-ce que vos données sont protégées
- Avez vous facilement accès à vos données
- Est-ce que vous avez accès de partout



# *Tricefy*

The Ultrasound Cloud

Collaborate – Archive – Share

# Communication des résultats à vos patientes et confrères

Utiliser des services et plates-formes validés  
Qui peuvent vous garantir un cryptage des vos données pendant  
le transfert, la collaboration avec vos collègues et le stockage  
conforme au RGPD





**Archive**  
securely in the cloud



**Access**  
anytime from any device



**Share**  
with experts around the globe



**Collaborate**  
with colleagues easily



# Partage Patiente





## Création de la patiente

Ouvrir la patiente dans VP → Aller dans les données patientes  
→ Vérifier mail et téléphone



	Medical History	Pregnancy History	Early Pregnancy
<b>Patient Data</b>	Last name: jemo	DOB: 04.05.1977	Gender: In
	Maiden name:	Gender:	Title:
	First name: test MI:		
<b>Address</b>	Country: USA	County:	State:
	Address:		
	City: ZIP:		
<b>Contact Details</b>	Home phone:	Cell phone: 00491733912840	E-mail: dagmar@tricing.com
	Work phone:		
<b>Nationality</b>	Nationality:	Preferred language:	Translator needed: Yes No
	Ethnic origin:		
<b>Personal Details</b>	Marital status:	Occupation:	
	Education:	Employer:	
<b>Health Insurance</b>	Insurance status:	Details:	
	Provider:		
<b>Report</b>	Greeting:		
	Closing:		
<b>Emergency Contact</b>	Last name:	Home phone:	
	First name:	Work phone:	
	Relationship:	Cell phone:	
<b>Comment</b>			


Données patientes:  
Ici vous pourriez rentrer les identifiants de la patiente

The screenshot shows a web-based patient demographics form. The form is divided into several sections: Patient Data, Address, Contact Details, Nationality, Personal Details, Health Insurance, Report, Emergency Contact, and Comment. The 'Contact Details' section is highlighted with a red box, containing the following fields:

Field	Value
Cell phone	00491735912840
E-mail	dagmar@triceimaging.com

The form also includes fields for Last name (demo), Maiden name, First name (test), MI, DOB (04.05.1977), Gender, Title, Country (USA), Address, City, ZIP, Home phone, Work phone, Nationality, Ethnic origin, Preferred language, Translator needed (Yes/No), Marital status, Education, Occupation, Employer, Insurance status, Provider, Greeting, Closing, Emergency Contact (Last name, First name, Relationship, Home phone, Work phone, Cell phone), and a Comment field.

- Vous faites votre examen et vous transférez les images vers VP
- Vous créez votre CR dans VP
- Vous choisissez les images et boucles que vous souhaitez partager avec la patiente
- Vous allez sur l'icône « AddOn » → Trice Export .....

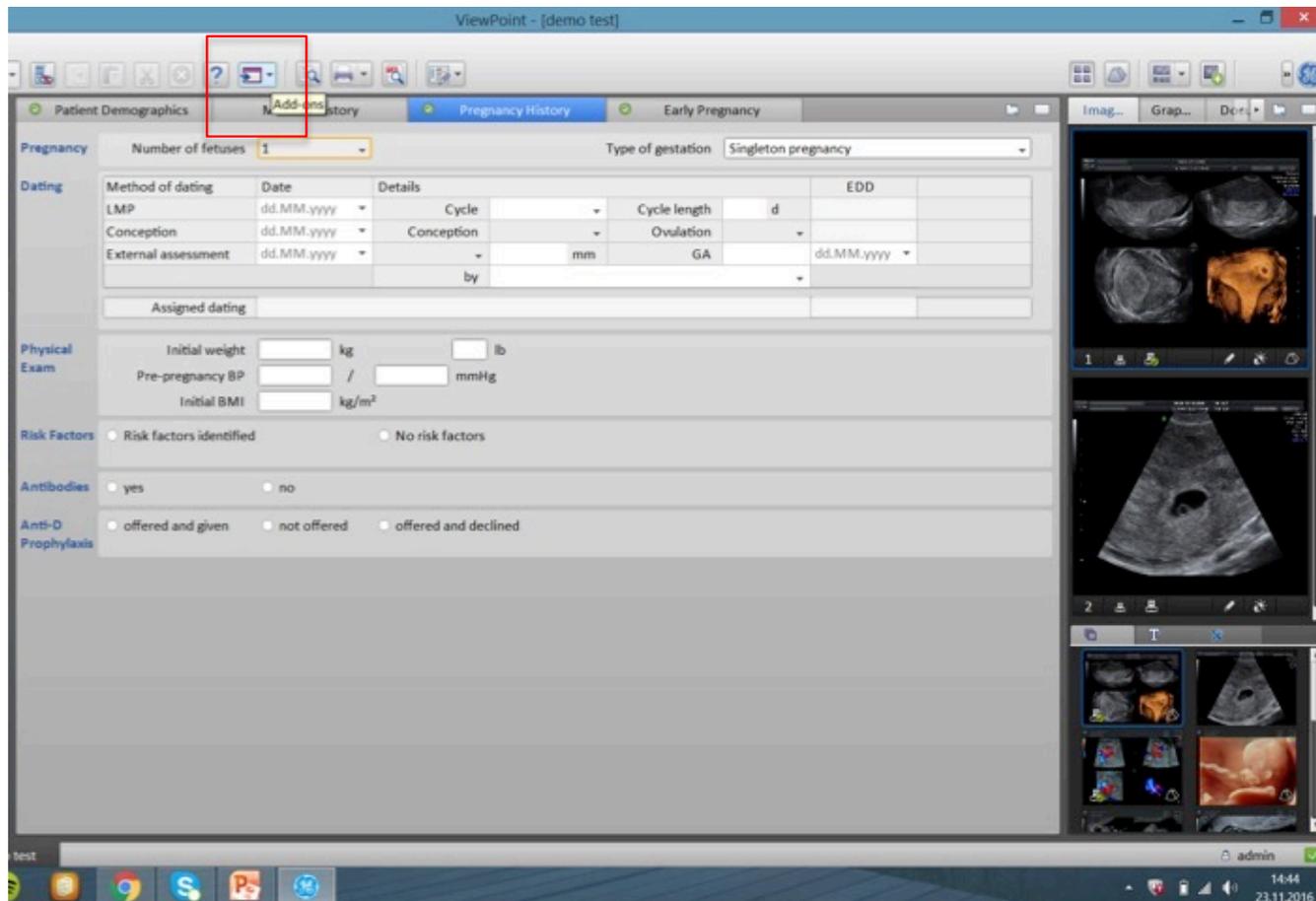

Share current exam via Tricefy

Share with Colleague **Send to Patient** Open in Tricefy

Tricefy v1.2

Share

No images **Selected images (1)** All images (12) **Include the report "Pregnancy History"** Include SR

To Patient: test demo

00491735912840, dagmar@triceimaging.com


(required) You can add multiple phone numbers and email addresses separated by commas.

ready

**Share Now** Cancel


The screenshot shows a medical software interface with various patient data fields. A red arrow points to a telephone icon in the 'Sexe' field. Another red arrow points to the 'Indication' field at the bottom, which contains the text '0603040506, email@test.de'. A pop-up window on the right shows contact information: '0603040506, email@test.de'.

Soit cette information est transmise en haut dans la case dédiée  
Sinon il faut le saisir dans cette case ou en bas dans indication  
Email ou téléphone ou les deux séparé avec une virgule

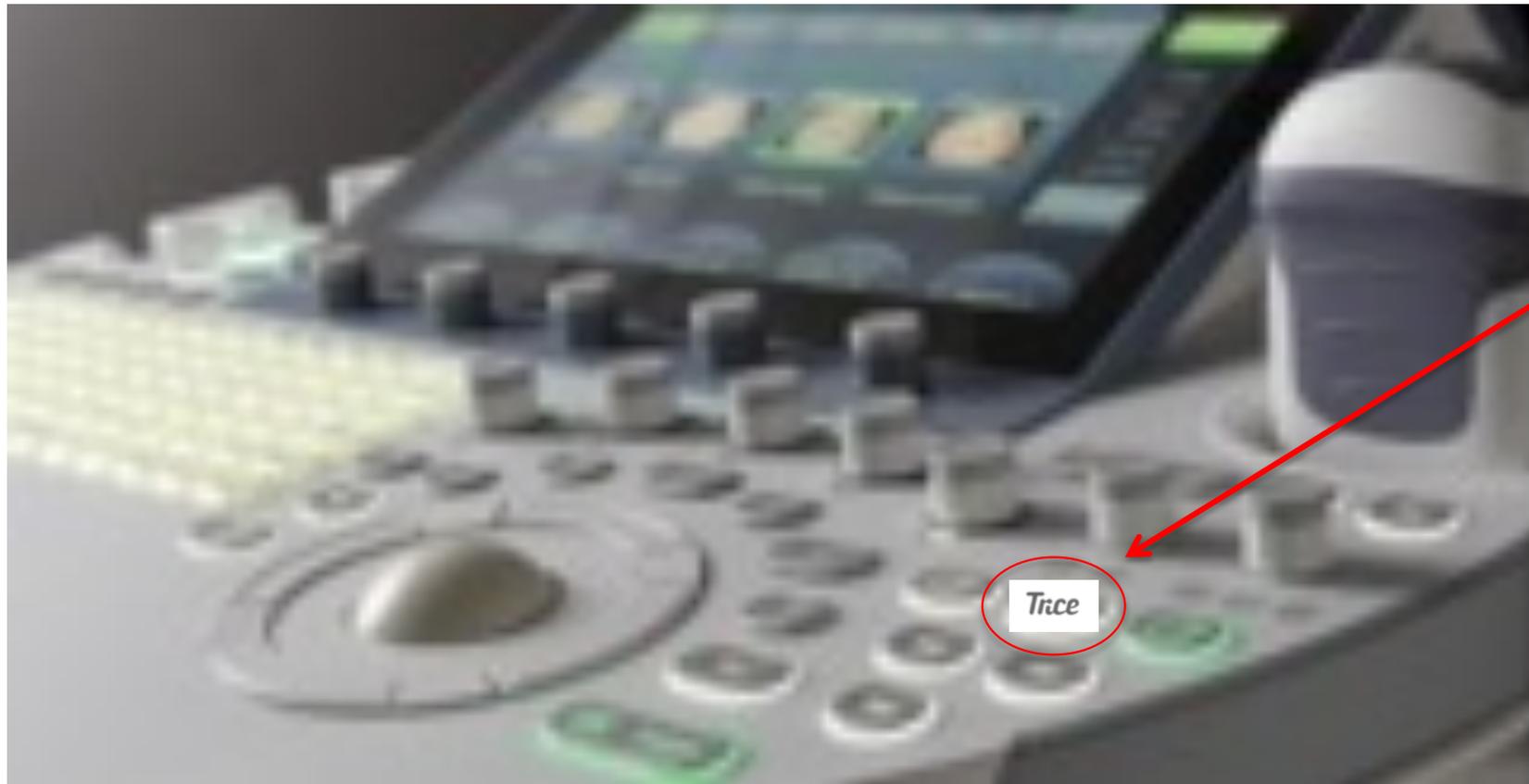



# Archive



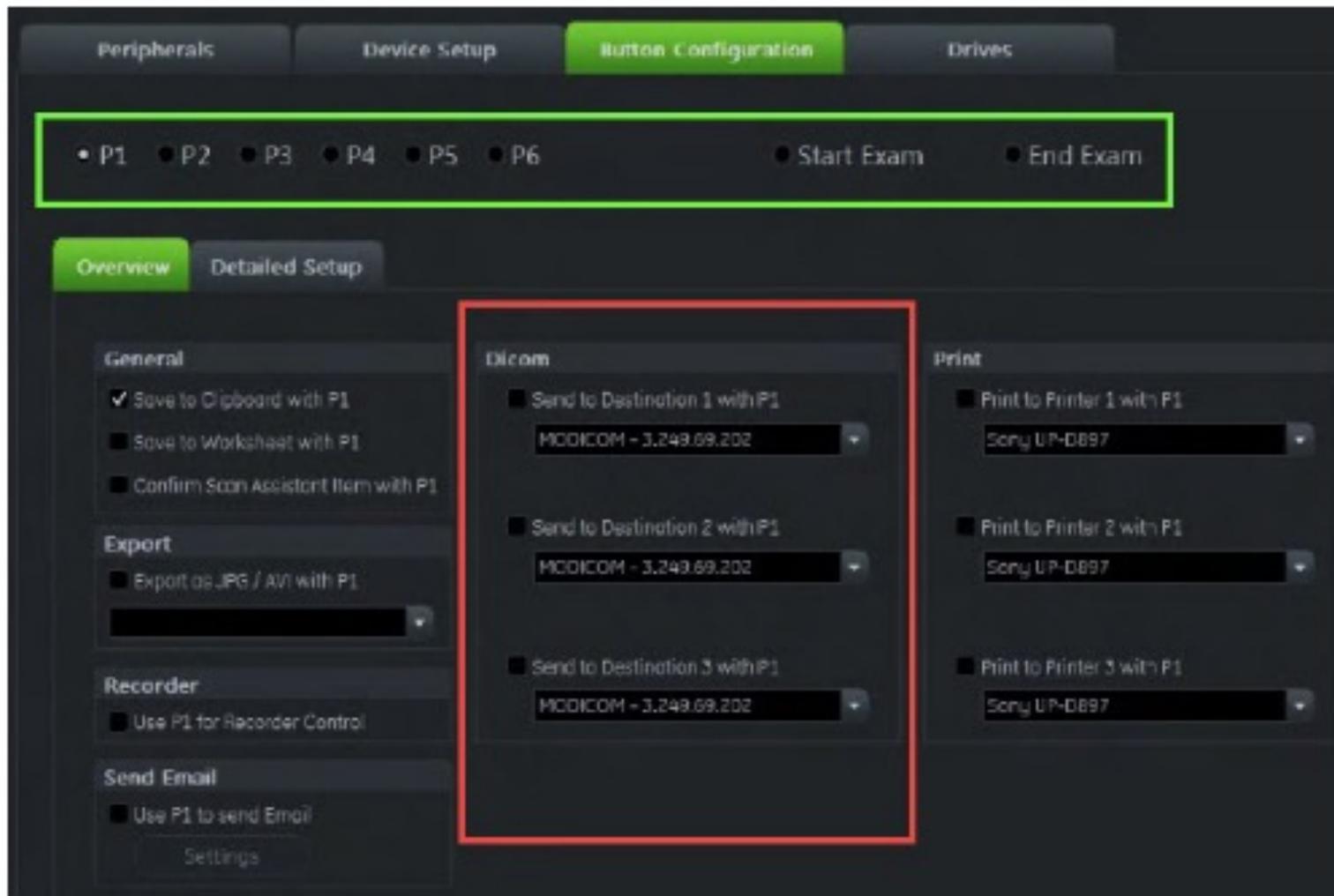

# Collaboration

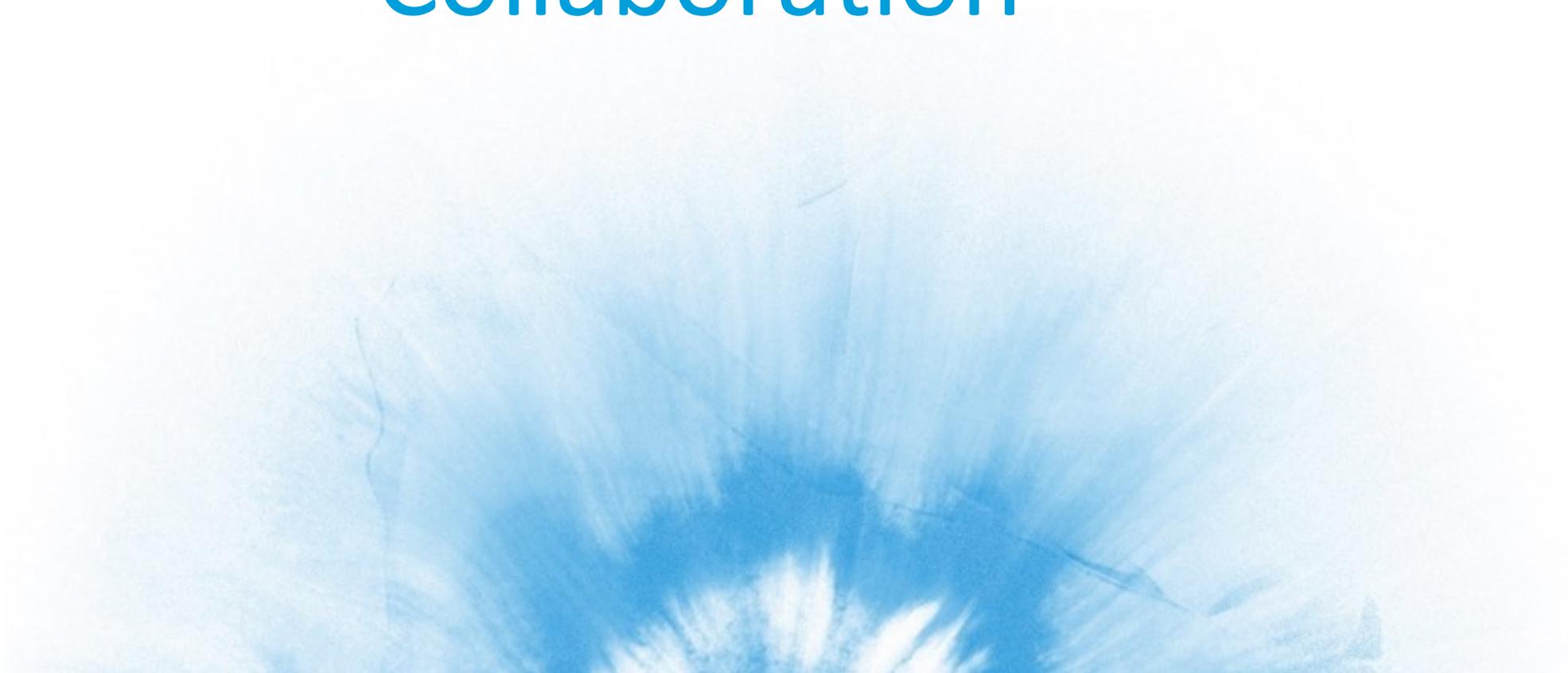

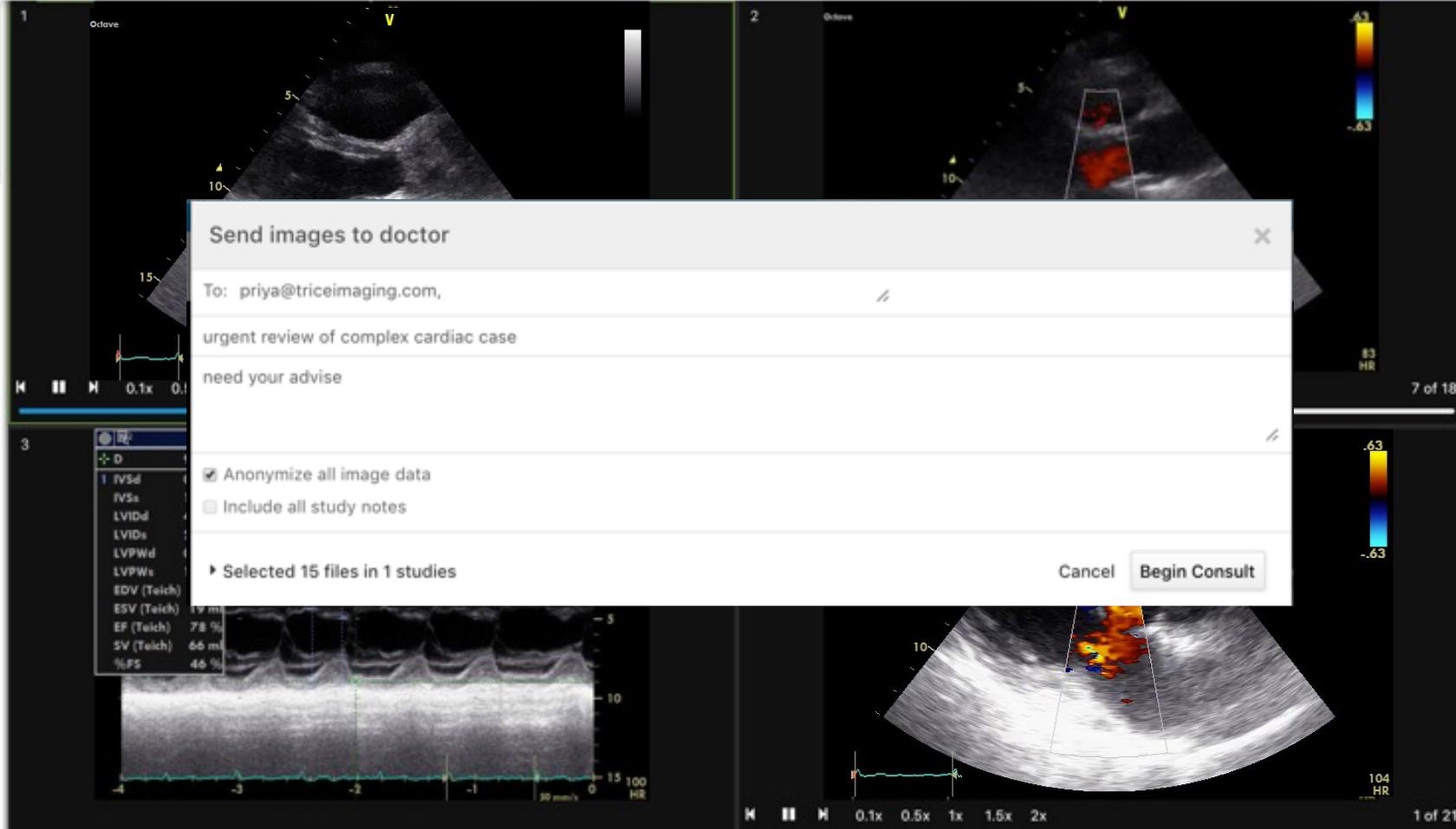

**Send images to doctor** [X]

To: priya@triceimaging.com, //

urgent review of complex cardiac case

need your advise

Anonymize all image data

Include all study notes

Selected 15 files in 1 studies

Cancel Begin Consult

The logo for Tricefy, featuring the word "Trice" in a white, serif font, positioned in the upper right corner of a green, textured background that resembles a leaf or a network of veins.

Message from Tricefy



**Welcome to Tricefy - the online platform  
for sharing and distributing medical  
imaging**

You have been invited to participate in a consultation using the Tricefy system. Accepting this invitation will grant access to view images and participate in the consultation.

[Accept Invitation](#)

urgent review of complex cardio case  
Bernd Nuber (you)

Send to... + Settings

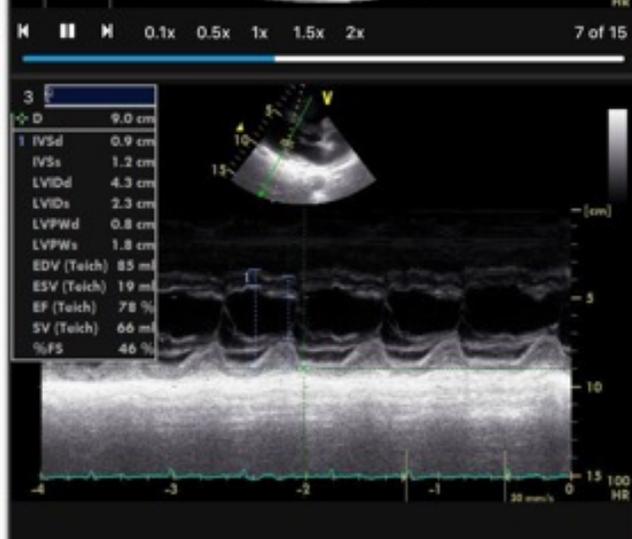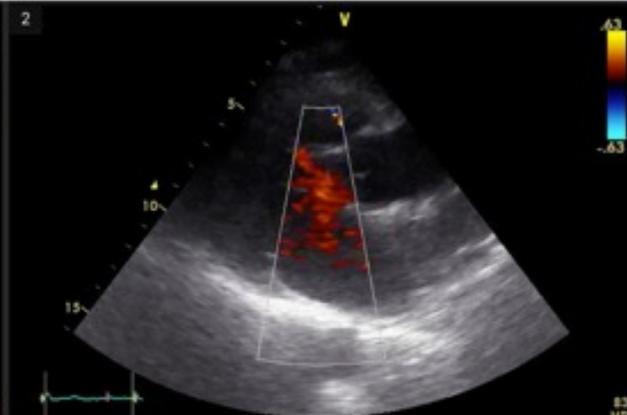

urgent review of complex cardio case  
Bernd Nuber (you)

INFO NOTES PARTICIPANTS ACTIVITY

TODAY

- Bernd Nuber (you)** 4 minutes ago ✕  
need your advice
- Priya Joshi** a few seconds ago  
LV looks enlarged.
- Bernd Nuber (you)** a few seconds ago ✕  
thanks for you quick follow up

Write a note

Add note

# Un seul outil



**Connect**  
your imaging device



**Collaborate**  
with colleagues easily



**Access**  
anytime, from any device



**Document**  
with flexible templates



**Share**  
with patients instantly

Effectif et simple à intégrer dans votre flux de travail

Innovant et correspond aux attentes de communication de votre clientèle

Accessible à tout moment et de partout

Conforme au GRDP



The simplicity of  
medical imaging,  
everywhere

– Thank You